

?Cómo hay que proceder a un problema de funcionamiento ?

Sintoma del error : El somier no retorna a su posición completa horizontal


Cosa fare se c'è un guasto

Tipo di guasto : Non è possibile tornare alla posizione sdraiata



Fonksiyon bozukluğunun giderilmesi

Hatanin tesbiti: Yatak çerçevesi 0-pozisyona geri dönmüyor

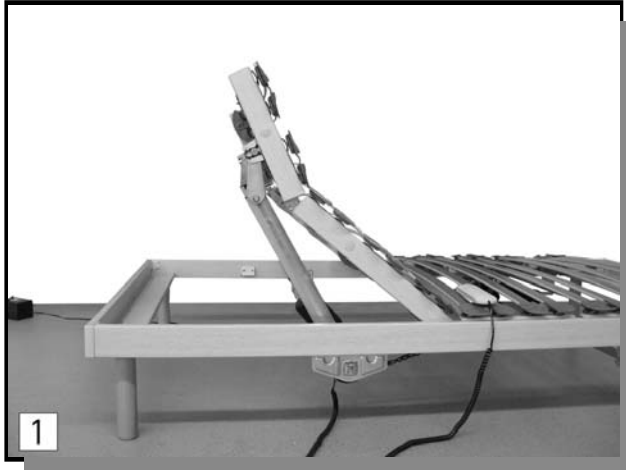

1. El somier no se encuentra en la posición horizontal. Se ha quedado la parte de cabeza o de pie elevada, o ambas
1. La rete non si trova nella posizione sdraiata
1. Yatak çerçevesi 0-pozisyonda değildir



2. Hay que utilizar un destornillador de cabeza plana como herramienta. Lo primero que haremos es soltar la pinza de muelle del soporte como indica la ilustración
2. Allentare il gancio a molla dal supporto servendosi di un cacciavite idoneo
2. Yaylı klipsini dayanak bağlantı parçasından uygun bir aletle çıkartınız




3. Con la misma herramienta hay que colocarlo entre el motor y el soporte como indica la ilustración
ATENCIÓN: !Peligro de contusión por caída del bastidor!
Para evitar el daño hay que sujetar el bastidor
3. Mettere il cacciavite fermo tra motore e supporto
ATTENZIONE! Pericolo di contusione!
Tenere fermo le parti della rete
3. Motor ile dayanak kısmı arasına uygun bir tornavida yerleştiriniz.
DİKKAT sıkıştırma tehlikesi! – Yatak çerçeve kısmını sıkıca tutunuz



4. Volver a colocar el destornillador de una forma segura entre el motor y el soporte

4. Mettere il cacciavite fermo tra motore e supporto

4. Motor ile dayanak kısmı arasına tornavidayı güvenli şekilde yerleştiriniz

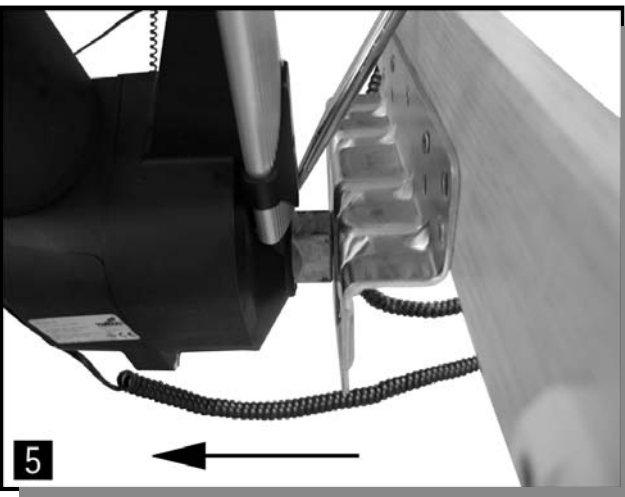

5. Con el destornillador proceder a la separación del cuadrado del motor del soporte como indica la ilustración

5. Per mezzo del cacciavite rimuovere l'attacco quadrato del motore dal supporto

5. Tornavida ile motorun üzerindeki 4 kenarlı kısmı dayanak kısmından dışarı çıkartınız



6. Después de haber liberado el motor del soporte volver a retornar manualmente la parte elevada del somier a la posición horizontal

6. Dopo di aver rimosso il motore, scendere la parte alzata della rete nella posizione sdraiata

6. Dışarı çıkarttıktan sonra, ayarlanabilir yatak çerçevesi kısmını 0-pozisyona getiriniz